



OlyLife 健康养护仪 テラヘルツ治療器

VITALITY WAND





双重能量，功效加倍 2つのエネルギー、効果が倍になる

テラヘルツ波

- 人体細胞と同じ周波數で共振して熱を生成する
- 皮下3-5 cmの深さまで貫通することができ、直接に深層筋組織に作用する
- 安全無害、放射線は日光の1/40のみ

太赫兹波

- 与人体细胞同频共振而生热；
- 可穿透人体肌肤3-5cm深度，直接作用于深层次肌肉组织；
- 安全无伤害，辐射仅为阳光的1/40。



PEMF

- 7.8 Hz低周波PEMF搭載
- 体の組織の修復と再生を促進する
- 新陳代謝を高め、血液の循環を良くする

PEMF

- 搭載7.8Hz低频脉冲电磁场；
- 促进组织的修复与再生；
- 提高新陈代谢，加速血液循环等。

不同温度适配 異なる温度の適応



ギア/温度	適用状況
1ギア-60℃	表層の血液循環と新陳代謝を促進し、筋肉痛と硬直を緩和する。長時間同じ姿勢を保つ人、例えばオフィススタッフ、運転手など、及び運動後に回復する必要がある人に適している。
2ギア-70℃	筋肉と関節を深く緩和し、関節炎、リウマチなどの病気に対して一定の緩和効果がある。慢性疾患を持つ人、例えば関節炎、リウマチ患者に適している。
3ギア-80℃	

档位/温度	适用情形
1档 - 60℃	促进表层血液循环和新陈代谢，缓解肌肉酸痛和僵硬。适用于长时间保持同一姿势的人群，如办公室职员、司机等，以及运动后需要恢复的人群。
2档 - 70℃	深层舒缓肌肉和关节，对于关节炎、风湿病等疾病有一定的缓解作用。适用于患有慢性疾病的人群，如关节炎、风湿病患者。
3档 - 80℃	

风压按摩

風圧マッサージ

风压按摩是一种借助气流产生的压力来对身体进行按摩的方式。

它通过特殊的设备产生**具有一定压力**和节奏的风，作用于**人体的肌肉、筋膜和穴位等部位**。风压的力量可以穿透皮肤和组织，模拟人工按摩的手法，如按压、揉捏、推挤等，以达到放松肌肉、舒缓疲劳、促进血液循环、缓解疼痛和紧张等效果。

与传统的手工按摩相比，风压按摩**更具均匀性和持续性**，能够为身体提供较为稳定和规律的刺激。



風圧マッサージは気流による圧力で体をマッサージする方法である。

それは特殊な設備を通じて適量の**圧力**とリズムを持つ風を作り出し、**人体の筋肉、筋膜とツボなどの部位に作用**する。風圧の力は皮膚や組織へ貫通できる。手の押し、揉み、押し出しなどのマッサージの手法をシミュレートすることによって筋肉を緩和し、疲れを取り、血液循環を良くし、痛みや緊張を緩和するなどの効果を達成できる。

伝統的なマッサージに比べ、風圧マッサージは**均一性と持続性があり、身体に安定とリズム刺激**が提供できる。

健康养护仪5大功效 テラヘルツ治療器の5つの効果



激活和修复细胞

細胞の活性化と修復

快速打通微循环

微小循環を素早く貫通する

快速打通经络

経絡を素早く貫通する

快速淋巴排毒

急速にリンパ老廃物を流す

快速排寒祛湿

急速に体の寒さと湿気を除去
する



智能支架，解放双手 スマートスタンド、手を自由にする



采用智能遥控支架
解放双手
多模式随意切换
自动60°旋转

スマートリモコンスタンドを採用する，手を自由にする
マルチモードが自由に切り替えられる
60°自動回転

45分钟自动停机
停机后自动大角度转向，离开人体
以免发生磕碰

45分間自動ストップ
停止後、人体とぶつからないように自動的に大きな角度で方向を回す



简约设计

シンプルなデザイン

时尚化 科技化 精细化

ファッション テクノロジー 精密化



数字图标显示，一目了然 デジタルアイコン表示で一目で分かる



图标动态显示

- 档位0→1→2→3
- 45分钟倒计时
- 能量发射图标

切换档位，倒计时不改变

アイコンのダイナミック表示

- 4速ギア0→1→2→3
- 45分間カウントダウン
- エネルギーの起動アイコン

ギアを切替えても、カウント
ダウンは変わらない



智能控制

- 45分钟自动停机
- 关机后，仪器继续自动正向吹冷风3秒，降温仪器；
- 冷却后，暂停2秒，反向吹风2秒，自动清洁。

スマート制御



- 45分間自動停止
- オフにした後、機器は引き続き自動的に正面へ冷風を3秒間吹き出し、機器自体を冷やす。
- 冷却後、2秒間一時停止し、また反面へ2秒間吹き出し、自動的にクリーンする。

- 因工作需要，久站久坐或者強體力勞動者；
- 患有肌肉勞損、關節炎等導致的關節疼痛、肌肉疼痛的患者；
- 局部軟組織損傷，處於恢復期的人群；
- 患有頸椎病、腰椎間盤突出等導致的肢體麻木、疼痛的患者；
- 神經損傷後需要促進神經修復的人群；
- 肩周炎、腱鞘炎患者；
- 骨折後康復期的人群等。



- 職種のため、長い間立って座っている方、或は肉体労働者
- 筋肉疲労、関節炎などによる関節痛、筋肉痛が続く患者
- 一部の軟部組織の損傷で回復中の人々
- 頸椎症、腰椎椎間板ヘルニアなどによる四肢麻痺、疼痛が続く患者
- 神経損傷の後に神経修復が必要のある人
- 肩こり、腱鞘炎の患者
- 骨折後、リハビリ中の人など

作用部位

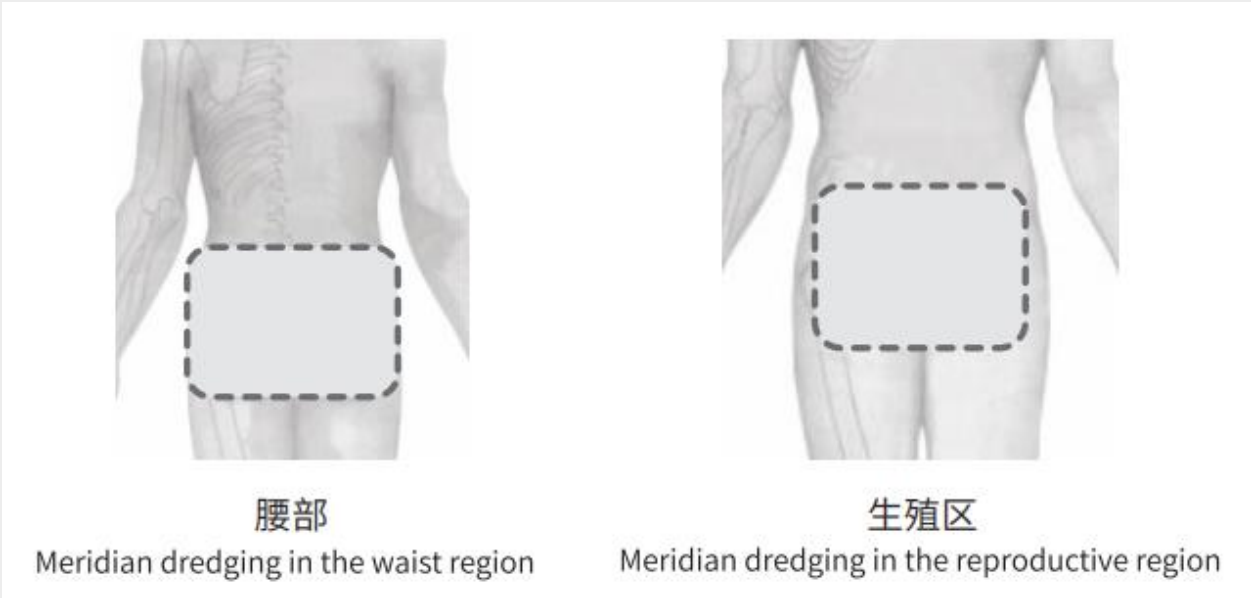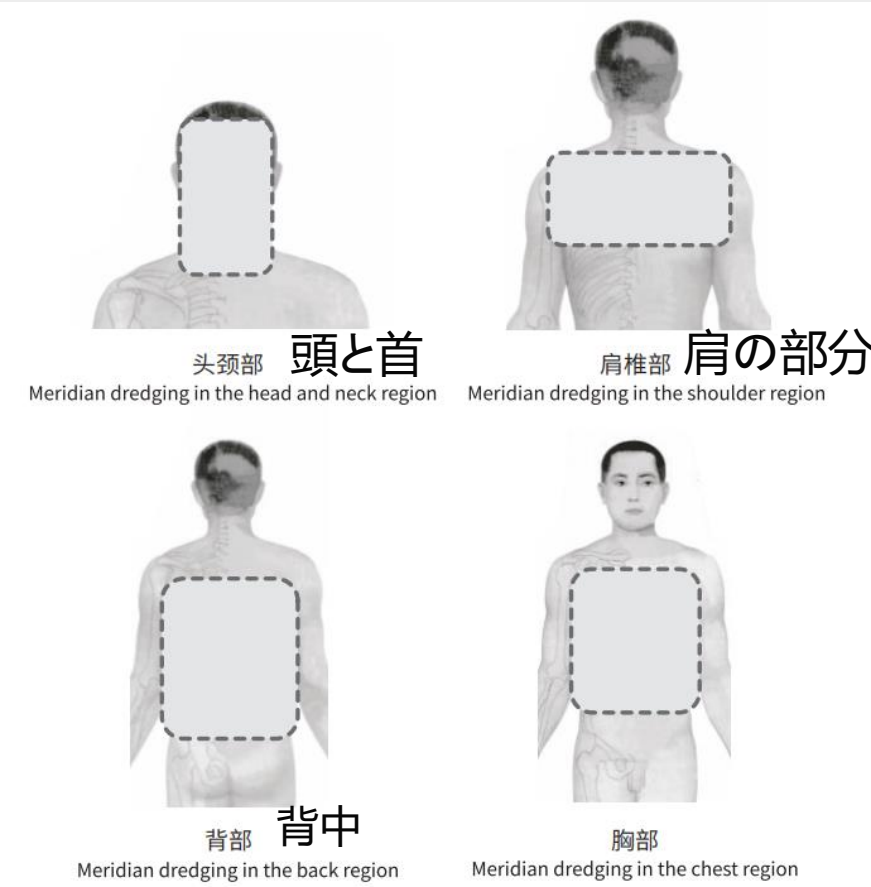

使用注意事项

- 多喝水——为加速代谢，使用前后饮用适量水；
- 更换轻薄质地衣服——为达到更好的保健效果，能量波最好可直接照射在皮肤上，如环境条件限制，可穿轻薄质地的衣服；
- 每次使用时间——45分钟以内；
- 女性生理期间禁用；
- 仪器出风口距离人体肌肤应大于20厘米，以肌肤能接受的最高温感为准以免高温烫伤。



- 水をたくさん飲む -- 代謝を上げるために使用前後に適量の水を飲む
- 軽量生地の服を着る -- より良い保健効果を達成するためにエネルギー波は直接皮膚に照射するのをお勧め、使用条件が限られた場合、軽量生地の服を着ましょう
- 1回の使用時間：45分間以内
- 女性の生理周期は使用禁止
- 治療器のノズルはの肌から20センチ以上離れなければならない。火傷を避けるために肌が温度耐性の最高温感を基準にすること。



OlyLife 健康养护仪

一身疲劳 风吹即散

OlyLifeテラヘルツ治療器

全身の疲れが吹くだけで疲労回復

