



THz Tera-P90


Instruction Manual

OlyLife THz Tera-P90をお選びいただきありがとうございます。


- ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。安全かつ正しい方法で
ご使用ください。
- お読みになった後は、このマニュアルを今後の参照用に保管してください。

OlyLife THz Tera-P90を知る


1. 操作パネル図

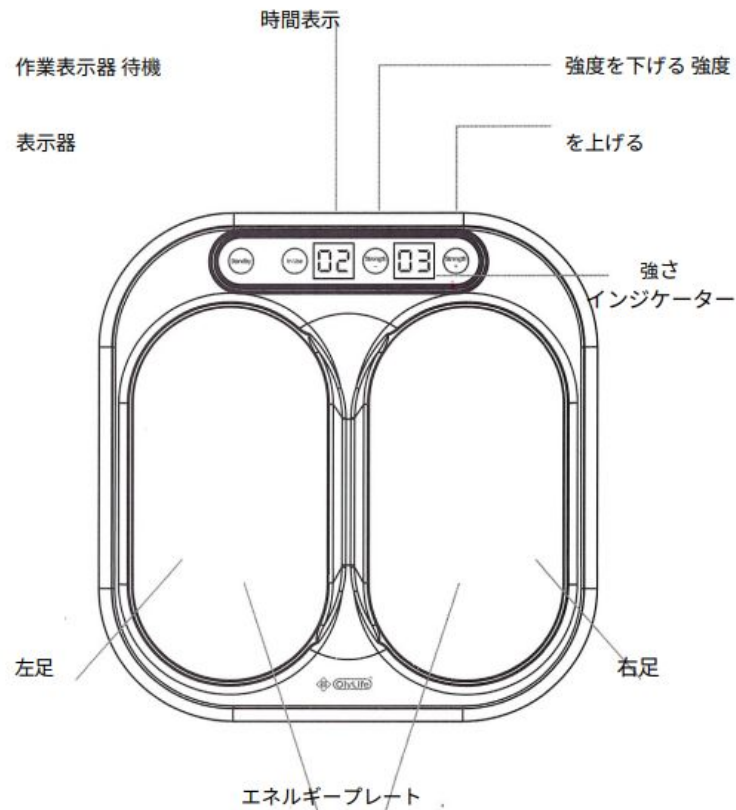

2. リモコン図

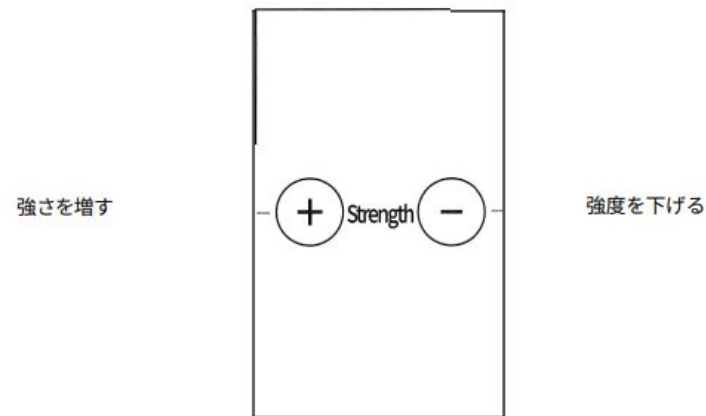

3. コンポーネントの説明

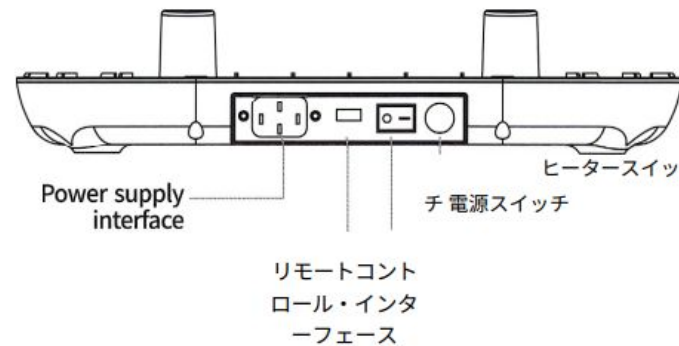

製品保証書（お客様）

4. 操作プロセスの説明

電源を入れると操作パネルが点灯し、"Standby"インジケータが赤く点灯します。その他のありません。

両足がエネルギー・ボードに乗ると、赤いスタンバイ・インジケータが消灯し、"working"インジケータが緑色に点灯します。時間インジケータの初期値は「30」、「強さインジケータ」の初期値は「01」となり、装置が開始します。強さキーのプラスまたはマイナスボタンを押すことで、お好みの強さに調整することができます。使用中、時間インジケータは1間隔で減少します。エネルギーボードから足が10秒以上離れると、デバイスは作動を停止し、「スタンバイ」モードに戻ります。10秒未満であれば、タイムインジケータが「01」に減少して「スタンバイ」戻るまで、デバイスは作動を停止。

初めて使用する場合は、あらかじめ電源スイッチを入れ、加熱スイッチを押してエネルギーボードを予熱しておくとい。暖房機能がな場合は、暖房スイッチをもう一度押してオフにすることができます。

名称		購入データ	
住所			
製品名またはモデル		現地代理店のシール	
OlyLife THz Tera-P90			
シリアル番号			

メンテナンスセンター

住所

電話番号

注:

- この保証書は大切に保管してください。メンテナンスがな場合は弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。
- 住所、電話番号等が登録異なる場合は、弊社ご連絡ください。
- 保証期間: ご購入日から365日まで。

製品保証登録カード（OfficeCopy）

5. 技術パラメーター

商品名	Thz Tera-P90
製品モデル	P90
動作電圧	110V
出力	270W
外観寸法	379 X 123 X 371mm

名称		購入日	
住所			
製品名またはモデル OlyLife THz Tera-P90		シリアル番号	

保証規定

1. 保証期間は購入日から1年間とし、保証中のメンテナンス費用は発生しない。
2. メンテナンスが必要な場合は、販売時の請求書と保証書をご提示ください。
3. お客様による不適切な使用や改造による損傷は保証の対象外となります。但し、有償メンテナンス提供いたします。

日付	故障の原因	アクセサリ の交換	サービス スタッフ	使用記号

6. アクセサリー一覧

THzテラ*90装置	1 set
リモコン	1 piece
製品取扱説明書	1 piece
電源コード	Tピース

7. 注意事項

こんな人には不向き：

1. 心臓病を患っている患者；
2. 妊婦と乳幼児；
3. 肺の合併症を患っている患者；
4. 意識障害のある患者；
5. 体温が37℃を超える人；
6. 人工心肺などの生命維持装置を使用している患者；
7. 出血傾向のある患者（子宮筋腫、月経中など）；
8. 熱に対する感受性が低い人（神経を圧迫する椎間板ヘルニア、糖尿病足、下肢の感覚鈍麻につながるその他の病気など）；
9. 心臓ペースメーカーやその他の金属製人工臓器キャリアなどのインプラントを使用している患者。

安全上の注意

- 1. 使用中に緊急事態（停電や故障など）が発生した場合は、直ちに電源を切ってください；
- 2. 使用中は、両脚を互いに触れ合わせず、手でレッグのどの部分にも触れないこと；
- 3. 楽器や身体に異常を感じたら、直ちに使用を中止してください
- 4. 使用後は電源を切ってください。加熱のために装置を使用することは固く禁じられており、装置をいかなる物でも覆わないでください；
- 5.子供や自己表現ができない人には使用しないでください；
- 6.浴室など湿度の高いしないでください。シャワーを浴びながら使用しないでください；
- 7.他の電気治療器を使用しないでください。火傷の原因になったり、機器が不安定になることがあります；
- 8、機器のエネルギープレートに触れないでください；
- 9、使用中に煙や臭いがした場合は、直ちに電源プラグを抜き、アフターサービス担当者にご連絡ください；
- 10.使用中、足や膝に触れないでください；
- 11.使用前に手足が乾いていることを確認してください。高温多湿の場所での使用は厳禁です；
- 12.足首やエネルギー・プレートには手を触れず、足の裏は完全にエネルギー・プレートにつけてください；
- 13. 電磁原理を使用する他の機器との同時使用は禁止されています；
- 14. 使用前に体に付着している金属ください。また、エネルギー・プレートに金属接触させることは固く禁じられています；
- 15. 中は他人に触れないでください；
- 16. 使用後は必ず電源を切るか、プラグを抜いてください；
- 17. メンテナンス中であろうと通常のテスト中であろうと、装置が稼動状態にあるときは、無負荷活動を減らすようにしてください；
- 18. 30連続使用した後、20分間停止する必要があります。

- 19. 最近、エステサロンやクリニックで、肌に強い赤みや腫れを引き起こし、一定の回復期間を必要とするトリートメントを受けた方は、本製品を使用する前に医師にご相談ください。

操作上の注意

- 1. 環境に応じて、使用前に「ヒータースイッチ」をオンに必要があるかどうかを選択してください。エネルギープレートが冷たいと感じたら、予熱のために"ヒータースイッチ"をオンにし、エネルギープレートが暖かい加熱された後に"ヒータースイッチ"をオフにしてください；
- 2. 裸足はエネルギー版の上に別に置いて下さい。足の過度な加熱を避けるため、器具の使用中に靴下を履くことは禁止されており、エネルギー上にカバーを置くことも禁止されています；
- 3. ご使用の際は好みや感覚に合わせて好みの強さをお選びください。低い強さから徐々に好みの強さにしていくことをお勧めします。足裏が熱く感じたら強さを弱くしてください。1回30分を超えるご使用はおすすめできません；
- 4. 使用中は取扱説明書をよく読み、指示に従ってください。使用しないときは、プラグを抜いてください；
- 5. 計器は地面に置かなければならず、斜面のような凹凸のある場所に置いてはならない；
- 6、使用後は電源を切ってください；
- 7.エネルギープレートと操作パネルは洗浄せず、湿らせた布で拭いてください。

更新日2024年6月11日

品質証明書

Inspector: 西内西

製品検査に合格した後、工場から出荷されます。

NOTICE

1. Avoid usage when body temperature exceeds 37°C. Do not wear socks while using this product.
2. Avoid using the product at the highest energy level for more than 30 minutes per usage.
3. When using the device for the first-time during winter or in a low temperature environment, you may turn on the power switch in advance and press the heating switch to preheat the energy board. Please turn off the heating switch before using the product.
4. While in use, do not let both your legs touch each other, and do not use your hand to touch any parts of your leg. Please do not touch the edge of the energy plate with your hands.

注意事項

1. 体温が37°C以上の時は使用しないでください。

プロダクト。

2. 1回の使用で30分以上の最高エネルギーレベルでの使用は避けてください。

3. 冬季や低温環境で初めて使用する場合は、あらかじめ電源スイッチを入れ、ヒータースイッチを押してエネルギーボードを予熱しておくといでしょう。
プロダクトを使用する前に暖房スイッチを消して下さい。

4. 使用中、両足を互いに触れさせたり、手で足のどの部分にも触れさせないでください。手でエネルギープレートの端に触れないでください。