

※免責事項：このGALAXY G-ONE User Manual（翻訳）は会社の正式な物ではありません。会員が製品を理解するために翻訳ソフトを使用して作成した物です。正しい理解については、ご自身で正式な User Manual を、ご確認ください。



ギャラクシー ジーワン


GALAXY G-ONE

Eye Massager

アイマッサージャー

User Manual

ユーザーマニュアル

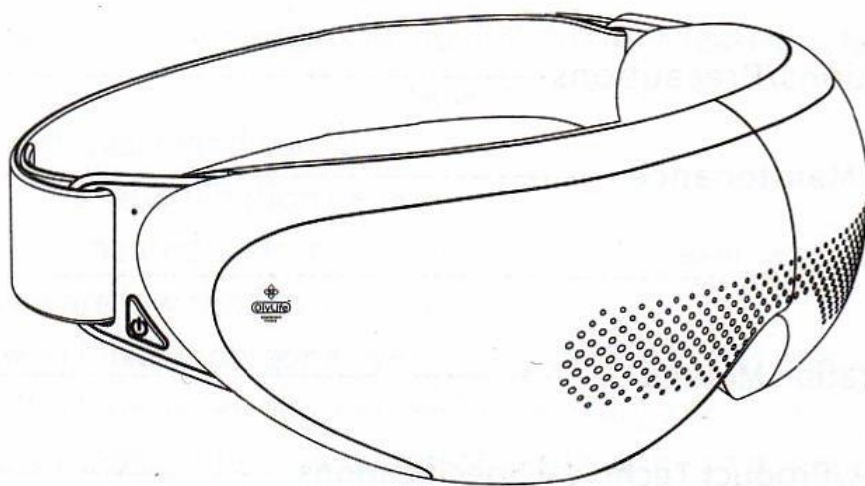

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みになり適切に保管して下さい。

Please read this manual carefully before use and keep it properly

当社製品をお選びいただきありがとうございます。

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みになり、今後の参照用に適切に保管してください。

製品の技術は常に更新および改善されているため、同じモデルの製品の取扱説明書の内容は、予告なく変更および更新される場合があります。

このマニュアルに示されているイラストは、標準モデルの外観に基づいており、デモンストレーションとしてのみ使用されています。実際の外観については、購入した実際の製品を参照してください。

製品の改良により、一部のパラメータが変更される可能性があり、変更されたパラメータは以前の製品に遡及しません。正確な情報については、製品ブランドのパラメータを参照してください。

表の内容

ユーザー手順/注意事項-----	01-03
保管とメンテナンス-----	04-05
コンポーネント名-----	06
製品の操作方法-----	07
FAQソリューション/製品の技術仕様-----	08
製品およびスペアパーツのリサイクル手順-----	09
バッテリーの分解手順-----	10
製品保証書-----	11
製品認証-----	12

ユーザーへの重要な情報

シンボルの説明

人身傷害や物的損害を避けるため、以下の指示に必ず従ってください。

- 以下のアイコンは、実行すべきアクションを示しています



禁止事項を示しています。



指示に従って行うべき行動を示します

適さない人



次の人は注意して使用してください

- 糖尿病による重度の末梢神経障害のある人
- 皮膚損傷のある人
- 手足がしびれやすい人
- 呼吸器疾患のある人
- 内臓疾患（胃炎、肝炎、腸炎など）の急性症状のある人
- 血管疾患のある人
- リハビリテーション機器を使用している人
- 本機器は表面が加熱されているため熱に敏感でない人は注意して使用してください
- 眼科手術を受けた人は医師の指示に従ってください
- 美容院やクリニックで回復期間を必要とする施術を受けた人、または過去 1 か月以内に皮膚の炎症や腫れを引き起こす施術を受けた人は、本製品を使用する前に医師に相談してください。



以下のグループ/状況には適していません:

- 医師から運動やストレッチを避けるよう勧められている方

血栓症、重度の動脈または静脈疾患、急性静脈疾患、各種皮膚炎、皮膚感染症のある方など、使用すると症状が悪化する恐れがあるため。

- ペースメーカーや人工心臓などの埋め込み型デバイスを使用している方、頭部に炎症やうっ血がある方、うっ血などの不快症状がある方、脳手術を受けた方。
- 心臓病、重度の脳血栓症の患者、医師に相談せずに本製品を使用することが適切でない方、または医師から使用しないよう勧められている方。
- 脳卒中患者、高血圧または低血圧の人、現在治療を受けている方、身体に異常を感じている方。
- 出血傾向または血液疾患のある方、骨粗しょう症、軟部組織疾患、悪性腫瘍患者、心臓病患者、急性疾患のある方。
- 妊娠中の女性および月経中の女性。
- 動作が遅い、身体的または精神的に不快な、または知的障害のある人。
- 7～14歳の子供および身体に障害のある人は、他の人の助けを借りてこの製品を使用する必要があります。
- 体温が38° Cを超える人。
- 加熱された表面の温度が上昇する可能性があるため、熱に敏感な人は使用しないでください。
- 皮膚または頭部に炎症、怪我、または火傷がある人は、一時的にこの製品の使用を控えてください。
- 使用中に背中痛み、めまい、嘔吐、動悸などの身体の異常な反応を経験した場合は、直ちに使用を中止してください。使用後は、長持ちさせるために、マシンを30分間休ませてください。

次の状況では使用しないでください。

- ひどく疲れているとき。
- 食事の前後30分以内。
- アルコールを摂取した後。

使用上の注意

- ⊘ 製品が破損している場合は使用しないでください。
- ❗ 使用中にめまいや頭痛などの不快感を感じた場合は、使用を中止してください。
- ❗ 電源コードとプラグが乾いていて、熱源から遠ざけていることを確認して下さい。
- ❗ 電源コードが破損した場合は、安全上の理由から、メーカー、修理部門、または同様の部門の専門家に交換してもらってください。
- ⊘ 誤動作を防ぐため、濡れた手でコントロール ボタンを操作したり、コントロール ボタンに水をはねかけたりしないでください。
- ⊘ 子供が製品で遊んだり、監督なしで使用したりしないでください。
- ⊘ 不快感を避けるため、食後すぐに使用しないでください。
- ⊘ 酔っているときや気分が悪いときは、この製品を使用しないでください。
- ⊘ 開口部に物を落としたり、差し込んだりしないでください。
- ⊘ ガソリン、シンナー、または同様の物質で掃除したり、殺虫剤を散布したりしないでください。
- ⊘ この製品は 1 人用です。2 人以上で同時に使用しないでください。
- ❗ 電源コードが破損している場合は使用を中止してください。
- ⊘ 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、結んだりしないでください。
- ⊘ 故障や感電事故につながる恐れがあるため、お客様自身で製品を分解、修理、改造しないでください。
- ❗ 使用中に故障や異常に気付いた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ⊘ 定格電圧以外の電源を使用したり、機器の筐体が破損している場合は使用しないで下さい。
- ⊘ 電源を入れたまま製品を放置しないでください。
- ❗ 使用中に身体に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談して下さい。
- ⊘ 濡れた手でコントロールパネルを操作したり、濡れた手で電源プラグを抜き差ししたりしないでください。
- ❗ 充電が完了したら、電源プラグをコンセントから抜き、適切に保管して下さい。

- ⊘ 火災の危険を防ぐため、製品の使用中は喫煙しないでください。
- ⊘ 腫れ、傷、または炎症を起こした皮膚部位には使用しないでください。
- ❗ 頭や体に不快感を覚えた場合は、医師のアドバイスに従って製品を使用してください。

使用上の注意

- ⊘ 使用中は、タオル、布、またはその他の物で製品を覆わないでください。
- ⊘ 浴槽、シャワー、シンク、またはその他の高湿度の容器の近くで本製品を使用しないでください。
- ⊘ エアゾール製品や酸素を使用する場所では使用しないでください。
本製品を湿気、水、ほこりの多い環境から遠ざけてください。
- ⊘ 温度が 35° C を超える環境や温度が急激に変化する環境では本製品を使用しないでください。
- ⊘ 運転中や高温多湿の環境でマッサージ器を使用しないでください。

保管とメンテナンス

保管条件:

輸送:

一般的な輸送車両に適していますが激しい衝撃、振動、強い圧力、強い日光への露出、雨や雪の飛沫から保護する必要があります。輸送は注文契約に従う必要があります。

保管:

-10° C ~ 45° C の環境温度範囲、80% を超えない相対湿度、70kPa ~ 106kPa の気圧範囲、換気がよく、強い日光や腐食性ガスのない屋内で保管してください。

取り扱い:

- 製品を長期間 (1 か月以上) 使用しない場合は、梱包箱に入れて保管してください。
- 製品を高温、多湿、蒸気が充満または直射日光の当たる場所に置かないでください。

3. 本製品に強い衝撃や振動を与えないでください（地面に落とすなど）。
4. 製品はお子様の手の届かない場所に保管してください。
5. 換気がよく、強い日光や腐食性ガスのない屋内に保管してください。

保管とメンテナンス

メンテナンス検査:

製品を使用する前に、次のチェックを実施してください。

1. 機械的損傷がないか確認します。
2. 付属のアクセサリを確認します。
3. 電源を入れた後、製品の監視機能が正常に動作しているかどうかを確認します。

異常が見つかった場合は、製品を使用せず、すぐに当社のメンテナンス エンジニアに連絡してください。機器を開ける必要があるすべてのチェックは、専門のメンテナンス担当者が行う必要があります。安全性とメンテナンスのチェックは、当社のスタッフが行うことができます。

メンテナンス:

清掃する前に、製品の電源をオフにし、AC 電源から切断する必要があります。製品にほこりが付かないようにしてください。定期的に製品を清掃し、汚れた場合は乾いた柔らかい布で拭いてください。本体が特に汚れている場合は、水または中性洗剤で湿らせた清潔な柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。

製品を損傷しないようにするためのクリーニング中の注意事項:

- (1) アセトンなどの強力な溶剤や揮発性物質を使用しないでください。
- (2) 研磨材(スチールウールや銀磨きなど)の使用は避けてください。水などの液体が機器内に入らないようにしてください。交換可能部品および/または取り外し可能な部品の交換手順:

1. 通常、充電には充電ケーブルを電源アダプターと一緒に使用します。充電ケーブルまたはアダプターが故障して交換が必要な場合は、当社が推奨する同じまたは同等タイプの電源アダプターを使用してください。
2. 指定されていない他の電源アダプターを使用すると、製品が損傷する可能性があります。

コンポーネント名 Component Names




USB ACアダプター
海外OK 100-240V



↑※充電器の
ACアダプター
を別途購入して
ご用意下さい。

ゴムバンド
Elastic band


※VRマスクを装着すると汗や
皮脂、ファンデーションの
ヨゴレを防ぐ事が出来ますが
「温湿布」が感じにくい場合が
あります。基本的に素肌に
装着するような設計です！

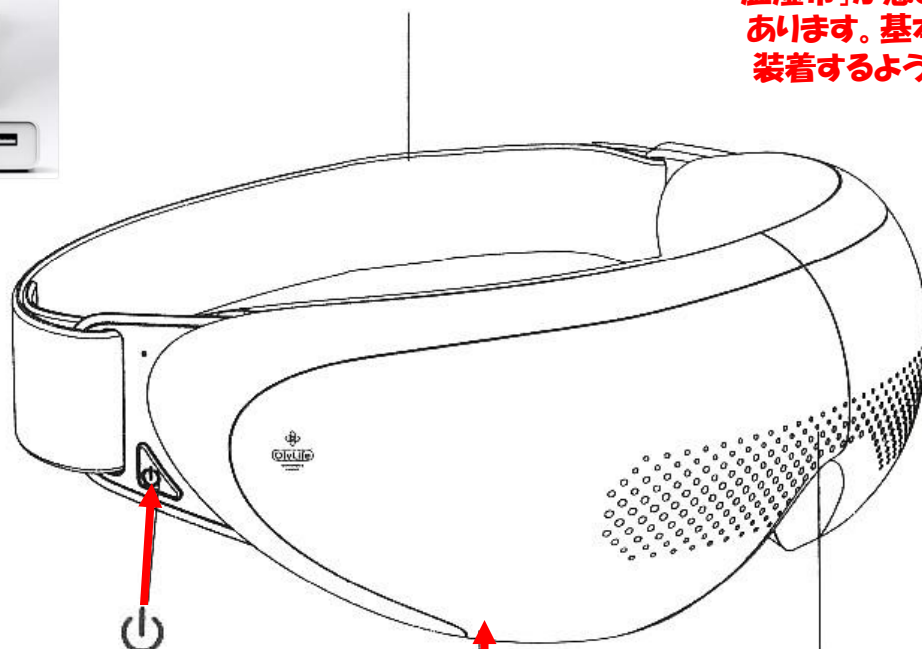

Power button
電源ボタン

Type-c charging port
Type-C
充電ポート

Front eye shield
フロント
アイシールド

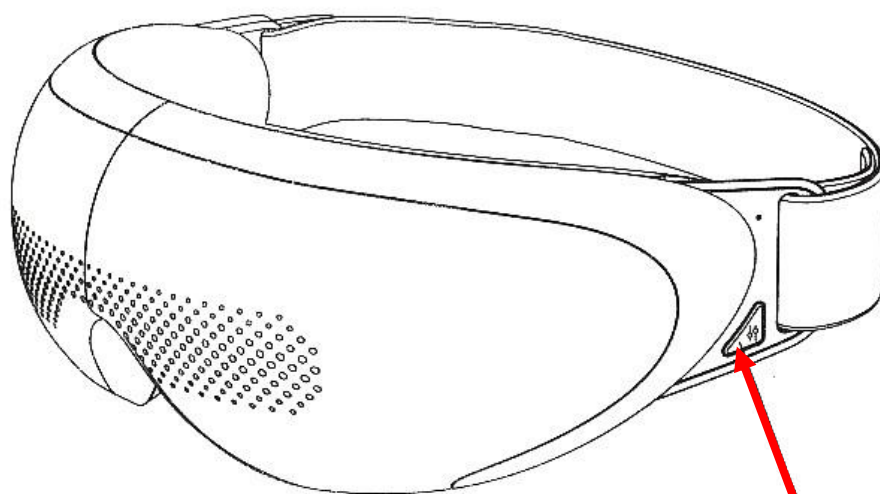

Voice switch button
音声スイッチボタン

初めに音声ボタンを短く押して、中国語と英語を切り替えます。
マシンは「中文播报」(中国語の音声プロンプト)と「**Voice Prompt
in English**」英語の音声プロンプト」をアナウンスします。デフォルト
(初期設定)の言語は中国語です。**英語に切り替えて下さい。**

製品の操作方法

- 1、[🔌] ボタンを長押しして、マシンの電源を入れます。フル機能マッサージ モードがデフォルトでオンになり、「“Full-function massage”フル機能マッサージ」とアナウンスされます。 ※デフォルト(初期設定)
- 2、[🔌]ボタンを長押しして、マシンの電源を切ります。「“Thank you for using, your session has ended”ご利用ありがとうございました。セッションは終了しました」とアナウンスされます。
- 3、電源オンの状態で、[🔌]ボタンを短く押してモードを切り替えます。
モードは次の順序で循環し、各モードを次のようにアナウンスします:「“Full-function massage”フル機能マッサージ」、「“kneading and hot compress mode”揉みと温湿布モード」、「“kneading and vibration mode”揉みと振動モード」、「“vibration and hot compress mode”振動と温湿布モード」、「“kneading mode”揉みモード」、「“vibration mode”振動モード」、「“hot compress mode”温湿布モード」。
- 4、[🔌]ボタンを短く押して、中国語と英語を切り替えます。マシンは「中文播报」(中国語の音声プロンプト)と「“Voice Prompt in English”英語の音声プロンプト」をアナウンスします。 デフォルト(初期設定)の言語は中国語です。英語に切り替えて下さい。
- 5、[🔌]ボタンを長押しして音声プロンプトのオン/オフを切り替えます。
マシンは「“Voice on”音声オン」または「“Voice off”音声オフ」とアナウンスします。
音声プロンプトがオフの場合、どのボタンを押しても音は出ません。

製品の充電:

- 1、電源を入れると、緑色のライトがバッテリー残量が少ないことを示します。
マシンは「“Low battery, please charge promptly”バッテリー残量が少ないため、すぐに充電してください」とアナウンスし、
緑色のライトが点滅します。充電中は緑色のライトが点滅します。
完全に充電されると、緑色のライトが点灯したままになります。

- 2、充電中はマシンを使用できません。

互換性のある充電方法:

- 1、5V/1A または 5V/2A の充電器を使用します。 ※(別途購入)→
- 2、充電にはコンピューターの USB ポートまたはパワー バンクに接続します。



注意: 上記以外の充電方法は使用しないでください。

製品仕様

製品名	Eye Massager
製品モデル	GALAXY G-ONE
定格入力電圧	5V 
定格入力電力	5W
バッテリー容量	1200mAh
充電時間	≦3H < 3 時間
フル充電あたりの使用回数	≈4 (4 回)
初期設定のセッション時間	15 minutes (15分)
製品寸法	220*125*81mm

トラブルシューティングガイド

No.	問題	考えられる原因	解決策
1	製品が動作しない	製品が充電中	充電完了後に使用する
		電源スイッチがオフになっている	電源スイッチをオンにする
		バッテリー残量が少ない	使用前に製品を完全に充電する
2	使用中に製品が停止する	自動タイミングが終了	再度使用するまで30分待つ
		製品に過負荷がかかっている (例：踏まれたり、重い物が置かれたり)	製品にかかる負荷を軽減する

リサイクル手順における製品およびコンポーネント

環境を保護するため、製品またはそのコンポーネントを廃棄した後、消費者はそれらを家庭ごみから分離し、認定リサイクル施設に送る責任があります。リサイクル施設は、国の規制に従って解体およびリサイクルを行います。

製品に含まれる有害物質の名前と含有量						
コンポーネント名	有毒および有害物質または元素					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBBs)	(PBDEs)
内部配線	○	○	○	○	○	○
電子部品	○	○	○	○	○	○
エアポンプ	○	○	○	○	○	○
加熱要素	○	○	○	○	○	○
シェル プラスチック	○	○	○	○	○	○
この表は、SJ/T11364 規制に準拠しています。 O: 有害物質に関する GB/T 26572-2011 の制限に準拠していることを示します						
X: 有害物質が、そのコンポーネント内の少なくとも1つの均質材料について、GB/T 26572-2011 で指定された制限を超えていることを示します。						
 このマニュアルに記載されている通常の使用条件では、この製品の環境保護使用期間は10年です。この環境保護使用期間内であれば、製品を安全に使用できます。この期間を過ぎた場合は、適切なリサイクルシステムを通じて製品をリサイクルする必要があります。						

注意

充電式バッテリー（リチウム バッテリー）のリサイクルにご協力ください。

警告

1. 誤って飲み込まないように、製品を子供の手の届かない場所に保管してください。
2. 誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
3. バッテリーの液漏れが発生した場合は、素手で液に触れず、次の処置に従ってください。

バッテリー液が目に入った場合、失明の原因となることがあります。
直接手で目をこすらないでください。すぐにきれいな水で洗い流し、医師に相談してください。

バッテリー分解手順

注意:

- 規制に従い、この製品を廃棄する前にバッテリーを取り外す必要があります
- バッテリーを取り外すときは、製品の電源を切る必要があります。
- バッテリーは、法的要件に従って安全に廃棄する必要があります。



専門家以外の方は、自分でバッテリーを分解しないでください。

バッテリー分解の手順:

1. 外部電源を切断し、製品の外側のカバーを取り外します。
2. バッテリーから電源プラグを抜きます。
3. バッテリーを分解します。
4. 指定されたりサイクルポイントでバッテリーを廃棄します。
5. 環境を保護するために、地域の環境保護法および廃棄ガイドラインに従ってください。

※免責事項：下記の「7つの目保護モード」の資料は会員が理解しやすいように作成した資料です。

GALAXY G-ONEが届いたら最初に右側の電源ボタンを3秒長押ししてスイッチを入れます。

次に左側の音声を中国語から英語に切り替える事をお薦めします。次に右側のモード(7つの動作)をスイッチを何回か押してみて音声と動作が変わる事を確認します。初期設定は「Full-function

massage「全機能マッサージ」に設定されています。慣れない内は電源のON&OFFのみ使用して音声のみ英語に切り替えるだけで良いと思います。※通常使いは全機能マッサージにして下さい。

★7つの目保護モード

※右側のスイッチでモード切換えします。

1	全機能マッサージ PEMF+押し揉み+温湿布+振動 "Full-function massage"	日常的な調整モード: 毎日使用して、様々な問題を調整します。
2	押し揉み温湿布モード PEMF+押し揉み+温湿布 "kneading and hot compress mode"	緩和モード: 目の充血やドライアイを改善。
3	押し揉み振動モード PEMF+押し揉み+振動 "kneading and vibration mode"	リラックスモード: 目の周りの筋肉を深層と浅層で全面的にリラックスさせます。
4	振動温湿布モード PEMF+温湿布+振動 "vibration and hot compress mode"	仮眠モード: 昼休みに使用し、目の疲れを和らげる
5	押し揉みモード PEMF+押し揉み "kneading mode"	弛緩モード: 目の周りの筋肉緊張を弛緩する
6	振動モード PEMF+振動 "vibration mode"	睡眠モード: 寝る前に使用し、急速に睡眠に入る
7	温湿布モード PEMF+温湿布 "hot compress mode"	再生モード: 目の周りの血液循環と細胞再生を促進

製品保証カード

※このページが「製品保証書」の部分です。
実物を保管して下さい。

保証条件:

1. 機械全体は、通常の使用条件で購入日から1年間保証されます。
2. 保証期間中に故障が発生し、通常の使用で無料修理が必要な場合は、このカードと請求書を指定された修理センターに持参して保証サービスをお受けください。
3. 以下の状況は無料保証の対象外ですが、有料で修理できます:
 - A. 消費者による不適切な使用、メンテナンス、または保管によって生じた損傷。
 - B. メーカー以外の修理担当者による許可されていない分解によって生じた損傷。
 - C. 有効な保証カードと請求書がない。
 - D. 保証カードが修理された製品のモデルと一致していないか、変更されている。
 - E. 不可抗力によって生じた損傷。
4. 紛失した保証カードは交換できませんので、大切に保管してください。
5. この保証書に明記されている修理事項に加え、有効な保証書をお持ちのお客様は、保証期間中、関連する国内法規で規定されている範囲内でその他の権利も享受できます。

製品名	
原産地	
保証期間	
請求書番号	
購入日	

メンテナンス記録

サンプル提出日	
検査日	
故障/修理/取り扱いの詳細	
修理施設	
修理技術者の署名	

Product Certification 製品認証

製品名: アイマッサージャー
製品モデル: GALAXY G-ONE

認証
Certification

Product Certification 製品認証

Product Name: Eye Massager

Product Model: GALAXY G-ONE

Production Date:

Inspector:



製造日:
QC
検査官:
2024.9.13 合格



Note: 注記:

in the manual. Failure to comply may exempt the company from assuming any responsibility for quality issues.

マニュアルに記載されています。遵守しない場合、当社は品質問題に対する一切の責任を負わない場合があります。

OLYLIFE INTERNATIONAL PTE.LTD.

1 Jalan Kilang Timor,#01-02 Pacific

Tech Centre,Singapore 159303.